

MYCOSAN

One-Off Steelwratjes Bevriezing

 Lees voor gebruik alle instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing goed door.

Bevriezingssysteem, cryotherapie-methode.


Geschikt voor het behandelen van steelwratjes- Voldoende voor 12 toepassingen.

Inhoud van Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing

- Een gebruiksklare applicator met een mix van dimethylether en vloeibaar propaangas (ontvlambaar maar onschadelijk voor het milieu).
- 12 Wegwerp opzetstukken voor 12 behandelingen.
- 3 Herbruikbare plastic huidbeschermers in drie maten, om de gezonde huid rond de steelwrat te beschermen.
- Een gebruiksaanwijzing die zorgvuldig moet worden gelezen, met instructies voor het juiste en effectieve gebruik van het Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezingssysteem middels cryotherapie.



Kenmerken van steelwratten:

Steelwratten (fibroangiomen) zijn ontsierende, goedaardige huidgezwellen in verschillende vormen en groottes. Deze groeien uit de huid en zijn verbonden met een steeltje dat dunner is dan het wratje zelf. Ze hebben vaak dezelfde kleur als de huid of zijn iets donkerder (hypergepigmenteerd), waarna ze zich ontwikkelen tot een lichtbruine tint. Ze voelen zacht en buigzaam aan bij lichte druk met de vingertop.

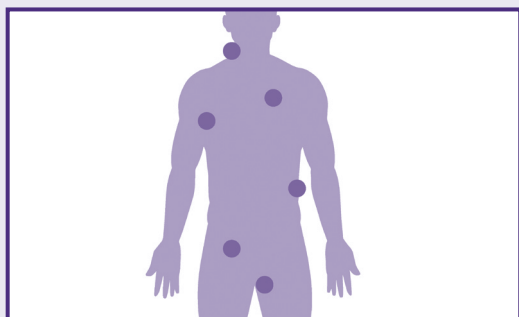

Meest voorkomende plekken

Steelwratjes komen vaak voor in de nek, onder de oksels, op de borst, op de rug, in de lies en op de dijen. Ze kunnen echter overal op de huid groeien.

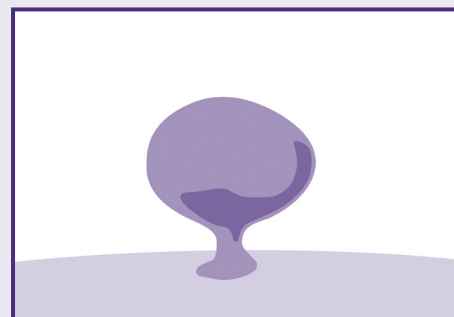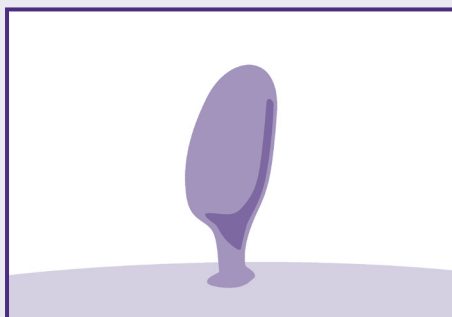

Meest voorkomende vormen en groottes

Steelwratjes hebben een dun steeltje dat dunner is dan het wratje zelf. De meest voorkomende hebben een langwerpige "rijstkorrel"- of bolvorm, maar ze kunnen verschillende vormen hebben en zelfs naar beneden hangen door de zwaartekracht. Groottes variëren meestal van 1 tot 6 mm.

Gebruik Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing alleen op bovengenoemde types steelwratjes.

NIET GEBRUIKEN op steelwratjes in het gezicht, de wenkbrauwen, ogen, mond, neus, lippen, oren, borsten, anus of genitaliën.

Als u niet zeker weet of het een steelwrat is, raadpleeg dan uw arts voordat u Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing gebruikt.

Duur van de behandeling

Zodra de applicator is doordrenkt met de bevroerende vloeistof, houd u de punt van het schuimen opzetstuk 40 seconden lang op de basis van het steeltje (waar het aan de huid is bevestigd) zonder deze te verwijderen, om de maximale effectiviteit van de behandeling te garanderen.

Hoe werkt Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing?

Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing is een cryo-verwijderingsbehandeling die het steeltje aan de basis van de steelwrat in enkele seconden bevriest. De huid op de behandelde plek wordt wit en er ontstaat een lichte pijn en branderig gevoel, wat normaal is. Na de behandeling vormt zich een kleine onzichtbare blaar aan de basis van de steelwrat, waardoor deze loskomt. Normaliter valt de steelwrat 10-14 dagen na de behandeling af, waarna er weer gezonde huid terug kan groeien.

Voorgeschreven gebruik:

Meestal is één behandeling voldoende. Herhaal de behandeling indien nodig na 2 weken. Grotere steelwratten zijn vaak hardnekkiger, dus het kan nodig zijn om de behandeling 2 of 3 keer te herhalen, waarbij u 2 weken wacht tussen de ene behandeling en de volgende. Als het probleem na drie behandelingen aanhoudt, raadpleeg dan uw arts. Als u meer dan één steelwratje dicht bij elkaar hebt, raden we u aan om deze apart te behandelen en 2 weken te wachten voordat u de behandeling herhaalt.

Na behandeling:

Na de behandeling wordt de behandelde huid eerst wit-achtig en vervolgens rood. De bevriezing veroorzaakt een lichte pijn en branderig gevoel dat geleidelijk verdwijnt. De behandelde plek blijft gevoelig en kan licht jeuken: dit zijn normale nawerkingen van de behandeling. Enkele dagen na de bevriezing kan er een kleine onzichtbare blaar ontstaan, die indien nodig met een hydrocolloïde pleister kan worden beschermd. Normaliter valt de steelwrat 10-14 dagen na de behandeling af, waarna er weer gezonde huid terug kan groeien.


Belangrijke tips om de effectiviteit van Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing te vergroten:

- Was uw handen na elke toepassing.
- Reinig de plastic huidbeschermers na elk gebruik met zeep en heet water.
- Bewaar de schone plastic huidbeschermers in het meegeleverde zakje.
- Houd het behandelde gebied schoon.
- U kunt na de behandeling in bad of douchen.
- Stel het behandelde gebied niet bloot aan zonlicht.
- Krab niet aan de steelwrat en trek er niet aan na de behandeling, maar laat het vanzelf loskomen.
- Raadpleeg uw arts bij infectie of andere complicaties.

INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

1. Elke huidbeschermer is genummerd van 1 tot 3, afhankelijk van de grootte van het gat in het midden, om de juiste maat gemakkelijker te kunnen kiezen. Kies de kleinste geschikte maat om de steelwrat te behandelen, afhankelijk van de diameter van het steeltje. Gebruik de juiste maat huidbeschermer voor een correcte behandeling. Neem een van de huidbeschermers en open de gleuf volledig. Schuif de huidbeschermer rond de basis van de steelwrat totdat de steelwrat in het midden van het gat zit. Sluit de randen volledig om de basis van de steelwrat, zodat alleen het steeltje van de steelwrat wordt behandeld en de gezonde huid eromheen beschermd blijft.
2. Plaats het schuimen opzetstuk in de opening aan het uiteinde van de applicator. Dit zal tot halverwege de applicator reiken. De andere helft blijft buiten, zodat de steelwrat kan worden behandeld.
3. Houd de applicator verticaal en plaats de activeringsdop, die een ON-OFF beveiligingssysteem heeft, op het mondstuk zodat deze alleen in de ON-positie kan worden geactiveerd. Om het mondstuk te activeren, moet u de pijl op de plastic basis van het mondstuk uitlijnen met de verticale lijn waarop ON staat op de activeringsdop.
4. DE AEROSOL MOET OMGEKEERD WORDEN OM DE APPLICATOR TE ACTIVEREN. Draai de aerosol ondersteboven (met zowel het schuimen opzetstuk als de dop correct geplaatst) en zet deze met de onderkant van de activeringsdop op een tafel op de onderkant. Houd de activeringsdop stevig vast met één hand en druk met de andere hand stevig naar beneden gedurende 1 seconde. Wanneer u drukt, hoort u een kort sissend geluid: het schuimen opzetstuk zal worden doordrenkt met koude vloeistof en het apparaat zal klaar zijn om de steelwrat te behandelen. Als u te lang drukt, kan er wat vloeistof in de basis van de dop komen: dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid, want de vloeistof verdampt snel. Laat de dop in dezelfde positie totdat de vloeistof verdampt is of leeg de dop indien nodig.
5. Houd de activeringsdop op de tafel vast met één hand en gebruik de andere hand om de bus te verwijderen, zonder de dop om te keren.
6. Houd de applicator in de hand en plaats de punt van het schuimen opzetstuk voorzichtig op de basis van de steelwrat (waar het aan de huid is bevestigd).
BELANGRIJK: om de effectiviteit van de behandeling te garanderen, blijft u lichte druk uitoefenen en zorgt u ervoor dat de applicator voortdurend in contact is met de basis van het steeltje gedurende de 40 seconden die de behandeling vereist.
7. Om het product veilig en hygiënisch op te bergen, zonder het risico dat de inhoud per ongeluk wordt gemorst, controleert u of er geen vloeistof meer in de dop zit en plaatst u de veiligheidsdop terug. Zorg ervoor dat de verticale lijn OFF is uitgelijnd met de driehoek op het plastic deel bovenop de applicator. Druk de dop daarna voorzichtig terug op zijn plaats.

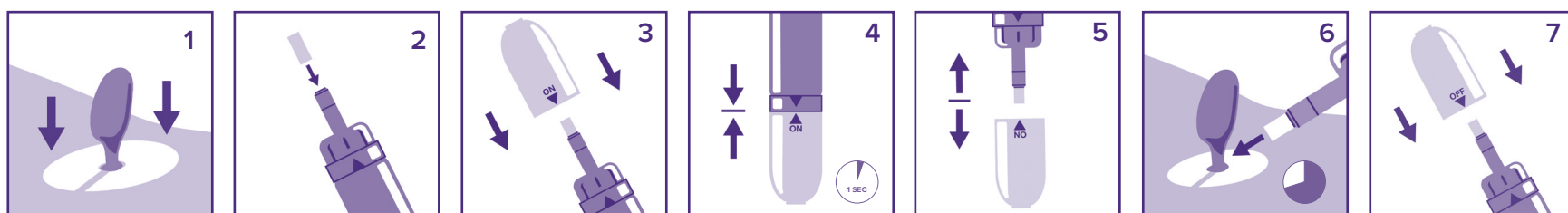

Waarschuwing:

Wacht na de behandeling drie minuten voordat u het schuim-opzetstuk met een tissue uit de applicator verwijdert. Gooi het schuim na elke toepassing weg. De inhoud van de applicator komt overeen met de benodigde doseringen voor 12 behandelingen. Het is mogelijk dat er na 12 toepassingen nog wat vloeistof in de applicator achterblijft: deze moet via het mondstuk worden gelegeerd voordat u de bus weggooit.

Bijwerkingen:

Het gebruik van cryobehandelingen kan tijdelijke huiddepigmentatie veroorzaken, die geleidelijk weer normaal zal worden. Elk gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot te diepe bevriezing, wat littekens of schade aan de onderliggende zenuwen kan veroorzaken. Overmatige bevriezing kan schade toebrengen aan het weefsel rond het steelwratje, daarom mag de applicator niet langer dan 40 seconden in contact zijn met de basis van het steelwratje.



Voorzorgsmaatregelen:

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat u tijdens de behandeling alle instructies nauwkeurig opvolgt.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Als er meerdere steelwratten dicht bij elkaar zitten, behandel ze dan afzonderlijk met een tussenperiode van 2 weken.
- Gebruik voor elke steelwrat een schuimen wegwerp-opzetstuk. Gebruik deze nooit meer dan één keer.
- Voer de Mycosan One-Off Steelwratjes Bevriezing behandeling niet meer dan drie keer uit op dezelfde steelwrat.
- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Drukhouder: kan barsten bij verhitting. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
- Weghouden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken – Niet roken.
- Niet spuiten in de richting van een open vlam of andere ontstekingsbron.
- Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.

Niet gebruiken bij:

- Bij personen jonger dan 18 jaar.
- Bij diabetici of mensen met circulatieproblemen. Raadpleeg een arts bij circulatieproblemen.
- Tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding.
- Op beschadigde, geïrriteerde of geïnfecteerde huid. Raadpleeg een arts bij twijfel over de aard van de huidgroei.
- Op donkere vlekken, moedervlekken, geboortevlekken of ongebruikelijke gezwollen gebieden met haren.
- Op dunne, gevoelige huidgebieden zoals het gezicht, de oogcontouren, neus, mond, kin, oren, borsten, anus of geslachtsdelen.



Lotnummer en houdbaarheidsdatum: zie doosje & aerosol
Na gebruik kunnen de aerosol, de bijsluiters en het doosje met het normale huisafval worden weggegooid. Controleer of de applicator leeg is voordat u deze weggooit.



Beschermen tegen zonlicht



Medisch hulpmiddel



0546



Fabrikant
Sixtem Life S.r.l.
Via E. Boni 19,
59100 Prato (PO) Italia
www.sixtemlife.it



Distributeur
Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Revisiedatum; november 2024
M734NL100
cod. SUR0805/NL
rev.00 del 18/12/2024

Ingrediënten
Dimethyl ether, LPG