

MYCOSAN

One-Off Wratten Bevriazing by Yglo

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Mycosan One-off Wratten Bevriazing gebruikt. We raden u aan de gebruiksaanwijzing te bewaren zodat u hem zo nodig later nog eens kunt lezen.

1. Inhoud van Mycosan One-Off wratten Bevriazing

Een drukhouder gevuld met 50 ml (op productiedatum) op moment van productie van het samengeperste vloeibare gas dimethylether. Er wordt een speciale applicator (actuator) gebruikt om de kou van het cryogeen toe te dienen op de wrat.

2. Achtergrondinformatie over wratten

Wratten zijn vergroeiingen van de huid of slijmvlies (zoals binnenkant mond, neus, anus, genitaliën, lippen) die worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Er zijn meer dan 80 verschillende soorten HPV. Veel daarvan worden aangetrokken door de huid, waar ze verschillende huidgerelateerde wratten veroorzaken, waaronder hand- en voetwratten.

Voetwratten, of verruca's, lijken op gewone wratten, maar komen alleen voor op de voetzool of onder de tenen. Ze zijn over het algemeen pijnlijk en zien er vaak uit als een kleine witte ring van huid met zwarte stippen in het midden. Verruca's zijn besmettelijk en kunnen worden overgedragen op een andere persoon door contact met een nat oppervlak zoals een vloer. Andere virussen worden aangetrokken door de slijmvlies en veroorzaken wratten op de genitaliën of rond de anus.

Huidgerelateerde wratten zoals gewone wratten en verruca's zijn over het algemeen onschuldig.

Wratten worden overgedragen van persoon tot persoon of bij dezelfde persoon van de ene lichaamslocatie naar de andere door aanraking of contact met huidschilfers. Meer dan 50% van de wratten verdwijnt binnen twee jaar zonder behandeling. Ze zijn echter lelijk en kunnen - zeker in het geval van voetwratten - pijn veroorzaken. Daarom kiest men er vaak voor om wratten te behandelen in plaats van te wachten tot ze verdwijnen.

Behandelingen voor wratten zijn onder andere verschillende topische zuurpreparaten, chirurgische verwijdering, wegbranden of cryotherapie (bevriazing). De meest toegepaste bevriezingsmethode is vloeibare stikstof, dit mag alleen door een arts worden toegepast.

3. Waarvoor wordt Mycosan One-Off Wratten Bevriazing gebruikt?

Mycosan One-Off Wratten Bevriazing wordt gebruikt voor de behandeling van gewone wratten en de verwijdering van verruca's aan de onderkant van de voet. Gewone wratten en verruca's (voetwratten) zijn onschadelijke gezwellen die bestaan uit een kern van binnenhuis (of bindweefsel) met bloedvaten bedekt met lagen buitenhuis (of epidermisweefsel).

Gewone wratten zijn huidkleurig, komen meestal voor op de handen en voeten en zijn gemakkelijk te herkennen aan het ruwe "bloemkoolachtige" oppervlak.

Verruca's komen alleen voor aan de onderkant van de voet en zijn vaak plat vanwege de druk die wordt veroorzaakt door het lopen. Verruca's groeien naar binnen, zijn vaak bedekt met eelt en kunnen erg pijnlijk zijn. Het voetafdrukpatroon is glad over het gebied waar de verruca zich voordoet, omdat er geen "huidlijnen" over het oppervlak van verruca's groeien.

4. Hoe werkt Mycosan One-Off Wratten Bevriazing?

Mycosan One-Off Wratten Bevriazing befrist wratten op vingers, handen en voeten. Door bevriazing wordt het aangetaste weefsel vernietigd. Wanneer de actuator eerst wordt gekoeld en vervolgens op de wrat wordt gedrukt (aangebracht), begint het bevroren binnen enkele seconden en wordt de huid wit (zie diagram en gebruiksaanwijzing). Als gevolg van de bevriazing treedt een licht pijnlijk, jeukend en/of prikkend gevoel op.

Nadat de actuator is verwijderd, zal de huid weer kleur krijgen en zal het pijnlijke, jeukende en stekende gevoel snel afnemen en binnen een paar uur verdwijnen.

Nadat het gebied is ontdooid en de kleur is teruggekeerd, kan de huid van het bevroren gebied rood worden. Als gevolg van bevriazing kan zich binnen een paar dagen een blaar (soms gevuld met bloed) onder de wrat vormen. Deze is niet altijd duidelijk zichtbaar. De bevroren huid met de behandelde wrat zal er na ongeveer 10-14 dagen afvallen. Ondertussen heeft zich onder de blaar nieuwe huid gevormd.

Elk ernstig incident dat zich in verband met dit product voordoet, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Neem voor alle productaanvragen contact op met de distributeur.

Fabrikant
TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Nederland

Distributeur
Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458,
1017 CA Amsterdam
Nederland

5. Gebruiksaanwijzing voor gewone wratten

1. Plaats de actuator op de spuitbus, met de metalen punt naar boven, en lijn de markeringen uit. Druk de actuator pas omlaag vlak voor gebruik om te koelen.
2. Plaats de spuitbus op een hard oppervlak en druk gedurende 5 seconden op de witte actuator. Laat de spuitbus vervolgens 5 seconden rusten. Wees voorzichtig en vermijd contact met de metalen punt wanneer u de actuator naar beneden drukt. (Druk niet langer dan aangegeven en wacht tenminste 5 minuten voor heractivering).
3. Verwijder de actuator uit de spuitbus, met de metalen punt naar boven.
4. Houd de metalen punt 20 seconden of minder op de wrat, afhankelijk van de grootte van de wrat (zie hoofdstuk 9). Zorg ervoor dat de metalen punt zoveel mogelijk van de wrat bedekt.
5. Was de handen (behalve het behandelde gebied) onmiddellijk na gebruik.
6. Wanneer de actuator door meer dan één persoon wordt gebruikt en/of na elke toepassing reinigen met wat alcohol op een doekje.

Het is belangrijk dat de instructies in de gebruiksaanwijzing precies worden opgevolgd. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot te diepe bevriazing, wat permanente schade kan veroorzaken aan de bovenste huidlaag op vingers en tenen. Dit kan leiden tot blijvende littekens of zenuwbeschade.

6. Gebruiksaanwijzing voor verruca's

1. Week de voet met de wrat 5 minuten in warm water. Grondig drogen. Vrij het gebied rond de wrat met een puimsteen of puimsteenvijl (niet inbegrepen in de verpakking van Mycosan One-Off Wratten Bevriazing voordat u het product aanbrengt).
2. Plaats de actuator op de spuitbus, met de metalen punt naar boven. Druk de actuator niet omlaag totdat deze klaar is om te koelen.
3. Plaats de spuitbus op een hard oppervlak en druk gedurende 5 seconden op de witte actuator. Laat de spuitbus vervolgens 5 seconden rusten. Wees voorzichtig en vermijd contact met de metalen punt wanneer u de actuator naar beneden drukt. (Druk niet langer dan aangegeven en wacht tenminste 5 minuten voor heractivering).
4. Verwijder de actuator uit de spuitbus, met de metalen punt naar boven.
5. Houd de metalen punt gedurende 40 seconden op de wrat. Zorg ervoor dat de metalen punt zoveel mogelijk van de wrat bedekt.
6. Was de handen (behalve het behandelde gebied) onmiddellijk na gebruik.
7. Als de actuator door meer dan één persoon wordt gebruikt en/of na elke toepassing reinigen met wat alcohol op een doekje.

Het is belangrijk dat de instructies in de gebruiksaanwijzing precies worden opgevolgd. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot te diepe bevriazing, wat permanente schade kan veroorzaken aan de bovenste huidlaag op vingers en tenen. Dit kan leiden tot blijvende littekens of zenuwbeschade.

Comfortpads (niet inbegrepen in de verpakking van Mycosan One-Off Wratten Bevriazing) kunnen worden gebruikt om het gevoelige gebied rond de wrat na de behandeling te beschermen.


7. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de informatie voor toekomstig gebruik.


Waarschuwingen

- Buiten bereik van kinderen bewaren. Kinderen begrijpen de instructies voor correct gebruik van dit product niet. De inhoud is gevaarlijk bij inslikken, inademen, verstuiwen of blootstelling aan hitte. Alleen voor uitwendig gebruik. Alleen gebruiken zoals voorgeschreven. Als Mycosan One-Off Wratten Bevriazing niet precies volgens de instructies wordt gebruikt of als u het per ongeluk rechtstreeks op de huid aanbrengt of gebruikt voor aandoeningen anders dan wratten, kan het ernstige brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken. Niet gebruiken als u de informatie op de verpakking of in deze gebruiksaanwijzing niet goed kunt lezen.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Mycosan One-Off Wratten Bevriazing is niet bewezen veilig voor gebruik bij kinderen onder de 4 jaar.
 - Niet gebruiken als u de te behandelen wrat niet goed kunt zien. Als u Mycosan One-Off Wratten Bevriazing per ongeluk aanbrengt op aandoeningen anders dan wratten, kan dit ernstige brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken. Niet gebruiken als u diabetes


Hoe Mycosan One-Off Wratten Bevriazing gebruiken.

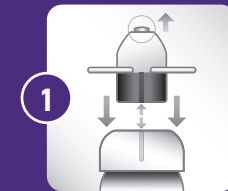


Plaats de actuator op de spuitbus, met de metalen punt naar boven en lijn de markeringen uit. Druk de actuator niet omlaag totdat deze klaar is om te koelen.

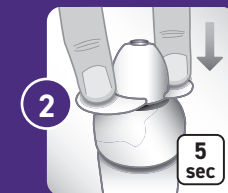

Plaats de spuitbus op een hard oppervlak en druk gedurende 5 seconden op de witte actuator. Laat de spuitbus vervolgens 5 seconden rusten. Wees voorzichtig en vermijd contact met de metalen punt wanneer u de actuator naar beneden drukt. (Druk niet langer dan aangegeven en wacht tenminste 5 minuten voor heractivering).

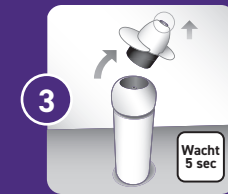

Verwijder de actuator uit de spuitbus, met de metalen punt naar boven.

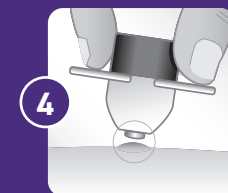

Houd de metalen punt 20 seconden op de wrat of 40 seconden op de verruca. Zorg ervoor dat de metalen punt zoveel mogelijk van de wrat of verruca bedekt.

50ml e      0482  

hebt of een slechte bloedcirculatie. Mycosan One-Off Wratten Bevriazing werkt door de wrat te bevriezen. Bij diabetespatiënten en mensen met een slechte bloedcirculatie geneest het bevroren gebied mogelijk niet zo snel of niet volledig.

- Niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het is niet zeker wat het effect van Mycosan One-Off Wratten Bevriazing is op patiënten onder deze omstandigheden.
- Niet gebruiken op gebieden met een dunne huid, zoals gezicht, oksels, borsten, billen of genitaliën. Gebruik op deze plekken kan brandwonden en blijvende littekens veroorzaken.
- Niet gebruiken op de geïrriteerde huid of op plekken die geïnfecteerd of rood zijn of tekenen van ontsteking vertonen, zoals jeuk of zwelling. Het behandelen van deze gebieden met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing zal leiden tot verergering van de aandoening en mogelijk verdere infectie. Deze aandoeningen zijn mogelijk geen wrat en moeten door een arts worden onderzocht.
- Niet gebruiken op moedervlekken, pigmentvlekken, wratten waaruit haar groeit, genitale wratten (op penis of in vaginaal gebied) of wratten op het gezicht of slijmvliezen (zoals binnenkant van mond, neus, anus, genitaliën, lippen, oren of in de buurt van ogen). Gebruik op deze plekken kan brandwonden en blijvende littekens op de huid of blindheid veroorzaken.
- Vermijd contact met de gezonde huid. Gebruik op deze plekken kan brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken.
- Vermijd contact met de ogen. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken. Wrijf niet in de ogen en raak ze niet aan met de handen als Mycosan One-Off Wratten Bevriazing erop is aangebracht. Roep onmiddellijk medische hulp in als het product in de ogen komt.
- Niet inslikken of inademen. De inhoud is giftig en kan ernstig inwendig letsel veroorzaken. Bij inslikken direct medische hulp inschakelen.
- Damp/spuitnevel niet inademen en alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten omdat het onzeker is hoe de damp/spuitnevel de longen beïnvloedt. De damp/nevel kan giftig zijn.
- Verwijderd houden van vuur of vlammen en van vonken of ontstekingsbronnen. Rook niet tijdens het gebruik van Mycosan One-Off Wratten Bevriazing. Blootstelling aan hitte kan ertoe leiden dat de houder explodeert en ernstig letsel veroorzaakt.
- De spuitbus niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Bewaren op kamertemperatuur en uit de buurt van warmtebronnen. Blootstelling aan hitte kan ertoe leiden dat de houder explodeert en ernstig letsel veroorzaakt.
- Behandel elke wrat in totaal niet meer dan drie keer met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing, omdat de behandeling mogelijk niet effectief is en brandwonden en blijvende littekens kan veroorzaken.
- De punt van de actuator bevat nikkel; gebruikers met een nikkelallergie moeten voorzichtig proberen vast te stellen of een allergie optreedt voordat ze de behandeling herhalen.

Raadpleeg bij twijfel uw huisarts. Als u een huidaandoening behandelt als een wrat met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing en het is geen wrat, dan vertraagt u de juiste behandelwijze. Deze vertraging zou kunnen leiden tot een ernstigere huidaandoening of ziekte.

Waarschuwingen

- Het product mag niet worden gebruikt na de houdbaarheidsdatum. Het partijnummer en de houdbaarheidsdatum staan op de onderkant van de spuitbus en op de buitenkant van de buitenverpakking.
- Bij gebruik van de actuator door meer dan één persoon en/of na elke toepassing reinigen met wat alcohol op een doekje. Als de actuator niet goed wordt schoongemaakt, kan er kruisbesmetting van het virus optreden.
- Als er meer dan één wrat op een vinger of teen zit, behandel dan maar één wrat tegelijk. Het bevriezen van meer dan één wrat op één vinger of teen is een te groot gebied om in één keer te bevriezen; in dat geval kan genezing langer duren of geneest het gebied niet goed. Behandel elke wrat op één vinger of teen afzonderlijk, met een periode van twee weken tussen de behandelingen.
- In de meeste gevallen is slechts één behandeling nodig voor elke wrat. Wratten zijn meestal binnen twee weken verdwenen na behandeling met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing. Als een wrat of een deel ervan twee weken na de behandeling nog niet is verdwenen, kunt u veilig opnieuw behandelen. Behandel elke wrat in totaal niet meer dan drie keer met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing. Raadpleeg uw huisarts als drie behandelingen niet tot verbetering hebben geleid.
- Het pijnlijke/prikkende gevoel bij behandelde wratten zou binnen enkele uren na het aanbrengen moeten verdwijnen. Bij verruca's kan het pijnlijke/prikkende gevoel 24 uur aanhouden. Als het ongemak of het pijnlijke/prikkende gevoel na deze tijd optreedt (3 uur voor gewone wratten en 24 uur aanhoudend voor verruca's) neem dan contact op met uw huisarts. Dit kan betekenen dat het gebied te diep bevroren is en dat medische hulp nodig is.
- Was de handen (behalve het behandelde gebied) onmiddellijk na gebruik. Het onmiddellijk wassen van het behandelde gebied kan ongemakkelijk zijn, omdat u nog wat pijn/prikkeling kunt ervaren. Het behandelde gebied mag gewassen worden nadat de pijn/het prikkelende gevoel is verdwenen.
- Inspecteer het product zorgvuldig voor elk gebruik. Als het product beschadigd lijkt, gebruik het dan niet meer en gooi het weg. Beschadigd product kan gas lekken.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van het product:

- Een prikkend, jeukend, pijnlijk gevoel tijdens en na het bevriezen dat snel afneemt na het ontdooien van het gebied.
- Mogelijke kleurverandering van de huid van wit naar rood.
- Mogelijk blaarvorming.
- Na een paar dagen kunnen er zwarte puntjes verschijnen in het midden van de wratten.

8. Vervolgbehandeling

Voor elke gewone wrat is in de meeste gevallen slechts één behandeling nodig. Verruca's kunnen meer dan één behandeling nodig hebben. Gewone wratten zijn meestal binnen twee weken na de behandeling met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing verdwenen. Als een wrat of een deel ervan twee weken na de behandeling nog niet is verdwenen, kunt u veilig opnieuw behandelen.

Behandel elke wrat in totaal niet meer dan drie keer met Mycosan One-Off Wratten Bevriazing. Raadpleeg uw huisarts als drie behandelingen niet tot verbetering hebben geleid. Gebruik Mycosan One-Off Wratten Bevriazing niet samen met andere methoden om wratten te verwijderen, omdat het niet zeker is hoe de combinatie de huid kan beïnvloeden. Combinatiegebruik kan leiden tot ernstige brandwonden en blijvende littekens op de huid.

Na het aanbrengen kan de kleur van de huid veranderen, variërend van wit tot rood. Onder de wrat kan zich een blaar vormen en normaal gesproken treedt er gedurende enkele uren een pijnlijk/prikkelend gevoel op. Als het pijnlijke, stekende gevoel tot de volgende dag aanhoudt, of als er een ander probleem optreedt (zoals bevriazing van de huid buiten de grootte van de wrat of minder gevoel), neem dan contact op met uw huisarts.

- Het is normaal dat het behandelde gebied een paar dagen gevoelig is.
- Na een paar dagen verschijnen er zwarte puntjes in het midden van de behandelde wrat.
- Houd het behandelde gebied schoon.
- U mag zwemmen of douchen.
- Prik blaren niet door. Het doorprikken van blaren is pijnlijk en kan leiden tot infectie.
- Bescherm blaren, indien nodig, met een gaasje of steriel hechtverband.
- Pluk of krab niet aan de behandelde plek, aangezien dit infectie kan veroorzaken.

Verwijder de verpakking en gebruikte onderdelen volgens de landelijke voorschriften.

Hoe spuitbussen te recyclen:

Zorg ervoor dat spuitbussen helemaal leeg zijn voordat u ze recyclet. Doorboor spuitbussen niet en druk ze niet plat. Maak alle losse of gemakkelijk te verwijderen onderdelen los, zoals het deksel, en gooi ze weg met de rest van uw te recyclen materialen. Let op: de punt bevat zware metalen en moet mogelijk worden afgevoerd als gevaarlijk materiaal volgens de plaatselijke wetgeving.











9. Duur van aanstippen

Als indicatie geldt de volgende aanstipduur:

	Doorsnede van de wrat	Behandelingstijd
Gewone wratten en verruca's op tenen en wreef	Kleiner dan 2,5 mm	10 seconden
Gewone wratten en verruca's op tenen en wreef	2,5 - 5,0 mm	15 seconds
Gewone wratten en verruca's op tenen en wreef	Groter dan 5,0 mm	20 seconden
Vereelde verruca's op de hiel of bal van de voet	Alle doorsnedes	40 seconden of minder

10. Uitleg van symbolen

De waarschuwingstekens en symbolen op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u dit product veilig en correct gebruikt en om u en anderen te beschermen tegen letsel. De symbolen worden in de onderstaande tabel uitgelegd

Symbol	Uitleg
	Symbol voor de fabrikant
	Symbol dat aangeeft dat de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd
	Symbol dat aangeeft dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat
	Symbol voor de houdbaarheidsdatum
	Symbol dat aangeeft dat het artikel een medisch hulpmiddel is
	Symbol dat de unieke apparaatidentificatie aangeeft
	Symbol dat de referentie aangeeft nummer van het apparaat
	Symbol voor het partijnummer
	Het product moet worden bewaard tussen 10°C en 25°C.
	Symbol dat aangeeft dat het product uit de buurt van zonlicht moet worden gehouden.